

FICHA TÉCNICA - Colchón Poliuretano



Colchón compuesto por núcleo de poliuretano y funda impermeable.

El núcleo de poliuretano es flexible y mecanizado en la parte inferior, formando canales que le permiten mejor ventilación y adaptación que distribuyen el peso del usuario, aliviando la presión de manera uniforme.

Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecnimoem** Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

Colchón Poliuretano

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS	190x90x15 *
PESO	6,80Kg
Núcleo POLIURETANO	15cm
Peso máximo del usuario	100 Kg
Mecanizado en la parte inferior	
Funda Impermeable	

*opciones de medidas, consultar

Núcleo Poliuretano ref. T 27120

PROPIEDAD	UNIDADES	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
Densidad Neta	Kg/m ³	ISO 845	25 24 – 26
Resistencia a la compresión 40%	kPa	ISO 3386/1	35 2,9 – 4,1
Elongación	%	ISO 1798	>=150
Resistencia a la tracción	kPa	ISO 1798	>=90
Deformación remanente 50%	%	ISO 1856/A	<=7
Nº Poros	Nº/cm	UNE 53201	TV 17
Fuerza de Indentación 40%	N	Iso 2439	130 110 - 150

Funda Impermeable

COMPOSICIÓN	50% Poliéster 50% Poliuretano
ELASTICIDAD TEJIDO (EN ISO 1421)	Tensión - 25/20 Alargamiento – 90/120
COLUMNA DE AGUA (EN ISO 811 pa ORIGINAL)	50000
DESPUÉS DE 50 LAVADOS	20000
ADHERENCIA DEL TEJIDO AL PU (UNE EN SO 2411)	2.5 daN/5 cm
ENCOGIMIENTO AL LAVADO 95% (UNE EN ISO 6330-2012)	Weft =<1,5 % Warp =<1 %
PERMEABILIDAD AL VAPOR (FNM -817)	>1500 GR/M2 24H
TEST IGNÍGUFO (UNE EN ISO 12952 1-2)	OK
TEST IGNÍFUGO (BS – 7175 CRIB5)	OK
PU LIBRE FTALATOS NORMA OEKO – TEX	<100
TEST TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS (ISO 20743-2)	OK
Staphylococcus aureus, Methicilin Resistan (MRSA)	
TEST TRATAMIENTO ANTIFUNCIDA (G 21-96)	OK
Aspergillus niger Trichosera virens	
RESISTENCIA PENETRACIÓN VIRUS SOBRE EL TEJIDO (ISO 16604)	OK
STERILIZATION 134°C / 5 min	OK
Penetración antimicrobina en húmedo (UNE EN ISO 22610-2007)	NO PENETRACIÓN

MANTENIMIENTOS

Se recomienda rotar el colchón una vez al mes, colocando la zona de la cabecera en los pies y viceversa.




*La garantía de los colchones es de 1 año, dicha garantía cubre única y exclusivamente defectos de fabricación. No se admiten devoluciones de colchones, fundas y/o almohadas en caso de estar usados.

Tecnimoem Care desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas y complementos para uso geriátrico y doméstico.

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el bien más valorado, **Tecnimoem Care** pone todo su esfuerzo en la investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las personas que, por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestros productos.

Tecnimoem Care, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros clientes.

SNR: ES-MF-000019199
Según (EU) 2017/745 MDR

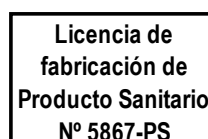

TECNIMOEM CARE S.L.

CTRA. Logroño-Mendavia Km.5
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA
tecniemoem@tecniemoem.com

Telf. +34 948 64 62 13
Fax. +34 948 64 63 80
www.tecniemoem.com